

**Lanaform Hydrojet  
HYDROPULSER**  
Návod k použití**PŘEDSTAVENÍ**

Děkujeme, že jste si vybrali ústní sprchu od Lanaform. Díky výběru ze 3 režimů není Hydrojet pouze čistíč mezizubních prostor a odstraňovač zbytků jídla, přístroj umí navíc odstranit zubní plak a bakterie, masírovat dásně a odstranit zubní kámen.

Přečtěte si prosím všechny instrukce a také všechna bezpečnostní upozornění předtím, než začnete přístroj používat.

**OBSAH**

- 1 Rozbalení produktu
- 2 Obsah balení
- 3 Bezpečnostní upozornění
- 4 Popis produktu
- 5 Návod k použití
- 6 Čištění a údržba
- 7 Výměna nástavců
- 8 Technická specifikace

9 Nakládání s odpady

10 Záruka

**1. ROZBALENÍ PRODUKTU**

Otevřete prosím opatrně balení. Zkontrolujte, zda je kompletní veškeré příslušenství a zda nebyly některé komponenty poškozeny během přepravy a během instalace a provozu se držte instrukcí uvedených v tomto manuálu. V případě nějakého poškození nebo poruchy kontaktujte prosím přímo prodejce Lanaform. V případě stížnosti budete potřebovat model přístroje, sériové číslo, datum nákupu, vaše údaje a vaši adresu.

**2. OBSAH BALENÍ**

- Ústní sprcha
- 4 nástavce
- 1 USB nabíjecí kabel

**3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Pozorně si přečtěte tyto bezpečnostní instrukce, než začnete přístroj používat.

- Nemiřte proud vody na jazyk, vnitřek ucha, nosní díky nebo jiné citlivé oblasti.
- Toto zařízení je schopné vytvářet tlak, který by mohl způsobit vážné léze.
- Toto zařízení je vyrobeno pouze pro osobní, ne komerční účely.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), nebo lidmi bez zkušeností či znalostí produktu. Pokud by měly tyto osoby přístroj užívat, musí se tak dít pouze po předchozím poučení o používání a v každém případě za dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- Ústní sprcha může být použita pod dohledem dětmi mladšími 8 let.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití popsané v tomto manuálu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním.
- Používejte pouze příslušenství doporučené společností Lanaform.
- Neházejte ani nevkládejte žádné objekty ani předměty do nádrže přístroje.
- Nepoužívejte výrobek na místech, kde jsou používány aerosolové nádoby, nebo na místech, kde je podáván kyslík.
- Nepoužívejte pro tento produkt jodové a solné roztoky, koncentrované éterické oleje, které jsou nerozpustné ve vodě. Používáním těchto příměsí může snížit výkon zařízení a zkrátit jeho životnost.
- Odstraňte veškeré ústní šperky před použitím zařízení.
- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte bezpečnostní upozornění. Nedodržením níže uvedených pokynů je pravděpodobné, že dojde ke zranění osob a poškození majetku. Uschovejte

tyto bezpečnostní pokyny tak, aby byly dostupné všem uživatelům. Pokud tento produkt někomu předáte nebo půjčíte, dejte mu také tyto bezpečnostní instrukce.

- Prosím ujistěte se, že přístroj nevypadá poškozeně, a že zapnutí a teplota jsou v normálu.
- Lidé s onemocněním parodontu, kteří podstupují zubní ošetření, nebo kteří mají obavy z příznaků v ústech, musí použití konzultovat se svým zubařem.
- Pokud si během používání všimnete jakéhokoliv poranění uvnitř úst, přestaňte přístroj používat a poradte se se svým zubařem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte uvnitř úst, na dásních nebo zubech nějaké poranění.
- Ústní sprchu užívejte se studenou nebo vlažnou vodou (max. 40°C).
- Používejte přístroj pouze za účelem ústní hygieny. Pokud by byl přístroj namířen jinam (oči, nos, hrdlo,...), mohl by způsobit nehodu nebo zranění.
- Nesdílejte nástavce se členy vaší rodiny nebo s jinými lidmi. Může to způsobit infekci nebo zánět.
- Nepoužívejte žádné soli, ústní vodu nebo jiné chemické produkty do vodní nádržky. Mohlo by to způsobit poškození.
- Nevysoušejte hlavní jednotku vlasovým vysoušečem ani fénem. Mohlo by to způsobit poškození.
- Po použití skladujte přístroj na místě s nízkou vlhkostí. Pokud budete nechávat přístroj v koupelně, mohlo by to způsobit jeho poškození.

#### Elektrický šok

- Tak jako u jiných elektrických zařízení, musí být i toto používáno opatrně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Použijte prosím nabíječku DC 5V 1A výstup v souladu místními platnými předpisy pro nabití tohoto produktu a správné připojení nabíječky k elektrické zásuvce, abyste zabránili jakémkoliv poruše nebo požáru způsobeného teplem.
- Nepřipojujte adaptér k napájení, pokud je přístroj zapnutý.
- Nepoužívejte přístroj nebo jeho příslušenství, pokud jeví známky poškození.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo do vody.
- Nepoužívejte zařízení během bouřky.
- Pokud je zařízení vadné nebo se porouchá, okamžitě jej vypněte. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za přívodní kabel nebo přístroj, pokud jej chcete vyndat ze zásuvky.
- Nepřenášejte přístroj ani nikdy netahejte za jeho přívodní kabel.
- Neštípejte kabel.
- Nepoužívejte ústní sprchu bez předchozího nainstalování nástavce.

- Vzhledem k tomu, že produkt má vestavěnou dobíjecí baterii, nevhazujte jej do ohně, ani jej nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, protože hrozí přehřátí přístroje a pak by hrozilo jeho poškození. Může dojít k požáru nebo ohni způsobnému teplem.
- Baterie tohoto produktu je samostatná baterie. Pokud ji budete používat i po překročení její životnosti, může uvnitř baterie dojít k chemické reakci, která způsobí roztažení a deformaci. Výrobek se může deformovat při vysokých teplotách nebo při silném nárazu. Pokud je výrobek zkroucený, nepoužívejte ho, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Napájecí adaptér udržujte mimo horké povrchy.
- Ujistěte se, že přívodní kabel a hlavní adaptér nepřišly do kontaktu s vodou, párou nebo jinou tekutinou.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V opačném případě by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku úniku elektrického proudu v důsledku zhoršení izolace.
- Nepokoušejte se zapnout zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě jej odpojte od hlavní zástrčky.

#### Opravy

- Přístroj nesmí být otevřený.
- Pouze specializovaný pracovník může opravovat elektrické zařízení. Jakákoliv neodborná oprava může uživateli způsobit značné riziko. Kontaktujte zákaznický servis nebo autorizovaného dealera pro jakoukoliv opravu.

#### Riziko ohně

- Jakékoliv neodborné používání nebo používání, které není popsáno v tomto návodu, může způsobit požár!
- Nepoužívejte přístroj pod zakrytým povrchem, pod krytem nebo např. pod polštářem.
- Nepoužívejte přístroj u vysoce hořlavých materiálů.
- Ujistěte se, že vzduchová ventilace není zakrytá.
- Nikdy neodpojujte přístroj, pokud je zapnutý. Vždy jej předem vypněte.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo nadměrně vlhkému prostředí.


#### 4. POPIS PRODUKTU

- 1 Kanyla
- 2 Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí
- 3 Tlačítko pro výběr režimu
- 4 Ukazatel režimu „Normal“
- 5 Ukazatel režimu „Soft“
- 6 Ukazatel režimu „Pulse“
- 7 Připojení USB kabelu
- 8 Nádrž na vodu
- 9 USB kabel

10 Připojení / odpojení kanyly

11 Otevření vodní nádrže


12 Víčko vodní nádrže

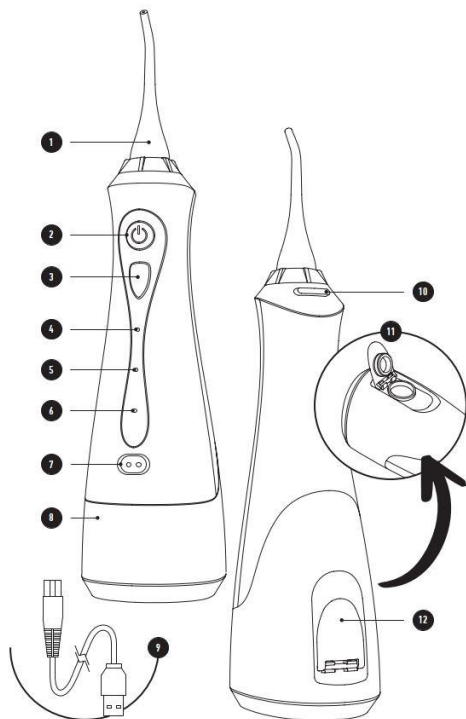

Používejte a udržujte kabel správně. Neohýbejte jej, neprotahujte, nekroutěte s ním nebo neomotávejte kolem nabíječky.

Instrukce k použití

Zajistěte kanylu v přístroji použitím tlačítka pro zajištění.

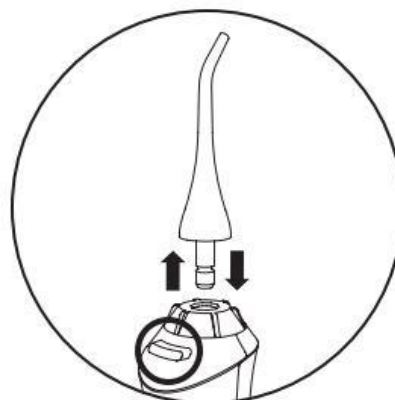

Otevřete vodní nádrž, dejte přístroj do horizontální polohy a naplňte jej studenou nebo vlažnou vodou (max. 40°C)

## 5. NÁVOD K POUŽITÍ

### Nabíjení

1 Nabijte prosím produkt před prvním použitím. Ujistěte se, že používáte nabíječku dle níže popsaných požadavků.

Pokud ji používáte v zahraničí, nejdříve se podívejte, zda napětí a nabíječka jsou vhodné pro danou zemi.

2 Nejdříve vypněte přístroj, než jej začnete nabíjet. Připojte USB kabel k nabíječce. Vložte nabíječku do hlavní jednotky.

3 Indikátor začne blikat, což značí proces nabíjení baterie. Až nabíjecí proces skončí, všechna světla budou svítit. V tomto bodě odpojte USB kabel z přístroje a dále ze zásuvky. Je celkem normální, že po nabití bude přístroj trochu teplý.

4 Přibližně 2 až 4 hodiny jsou potřeba k plnému nabití produktu. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

### Upozornění


Nikdy nezapojte nebo neodpojte kabel mokrou rukou (může to způsobit elektrický šok, přístroj může zkratovat).

Nepoužívejte přístroj na místech, kde je možné předpokládat vodu, jako je koupelna nebo vlhké prostředí jako prevence poškození přístroje nebo zkratu.

Používejte nabíječku dle požadavků na nabíjení.

Během nabíjení produktu se nezdržujte příliš blízko nabíjení; pokud odejdete na delší dobu, je třeba před odchodem ukončit nabíjecí proces.

Odpojte přístroj okamžitě ze zásuvky, vyskytnou-li se během nabíjení jakékoliv anomálie, nebo pokud je poškozený přírodní kabel.

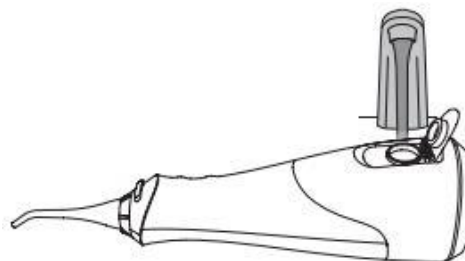

Zavřete nádrž na vodu a ujistěte se, že je zajištěná.


Pokud používáte přístroj poprvé, zmáčkněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí a nastavte jej.

Vyberte si jeden ze 3 režimů stisknutím tlačítka pro výběr režimu.

3 čisticí režimy:

### Režim SOFT


Tento režim je vhodný pro příjemnou masáž dásní. Jemně stimuluje problémové oblasti nasměrováním kanyly přímo na zasažené oblasti.

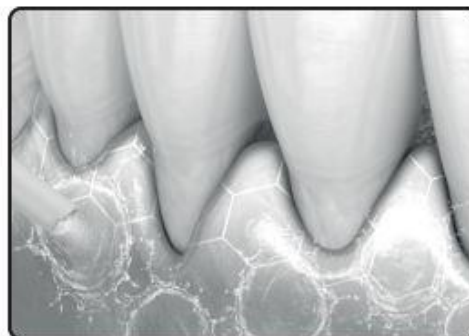

### Režim NORMAL

Tento režim je vhodný na léčbu zaměřenou na periodontální kapsy, odstranění bakterií a zubního plaku.

- 1 Přímý proud vody vyčistí mezizubní prostory a dásně.
- 2 Pomalu protáhněte proud vody kolem linie dásní.
- 3 Vyčistěte zadní a přední plochy zubů a stoličky.
- 4 Vyčistěte problémové oblasti dásní pomocí režimu „SOFT“

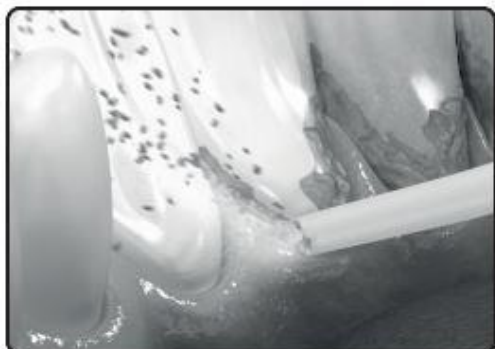

### Režim PULSE

Tento režim je vhodný na léčbu zaměřenou na mezizubní prostory a odstranění bakterií, stejně tak zubního plaku. Namiřte vodní paprsek do mezizubních prostor. Protáhněte kanylu z přední na zadní stranu zubu. Plná vodní nádrž je vyprázdněna během 1 minuty.

#### Poznámka

Umístěte kanylu dovnitř ústní dutiny. Před zapnutím přístroje jemně přivřete ústa.

Během čištění můžete měnit čistící režim.

Nastavte si směr proudu vody otáčením kanyly.

Po použití stiskněte tlačítko pro vypnutí hlavní jednotky.



#### Poznámka

- 1 Přístroj nemusí pracovat při okolní teplotě 5 °C a méně.
- 2 Netlačte silně kanylou na zuby ani dásně.
- 3 Plak na povrchu zubů, který nejde odstranit pouze vodou, je třeba důkladně vyčistit. Je doporučeno používat ústní sprchu až po důkladném vyčištění zubů.
- 4 Hlavní jednotku nespouštějte na prázdko. Výjimkou je vyprázdnění nádrže po použití. Spouštěním hlavní jednotky bez naplněné vodní nádrže může dojít k poruchám.
- 5 Pokud je kanyla poškozená, vyměňte ji za novou.

### 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1 Otevřete víčko vodní nádrže a vyprázdněte ji.
- 2 Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko pro spuštění.
- 3 Nechte přístroj běžet, dokud není vodní nádržka úplně prázdná. Pomocí tlačítka odstraňte kanylu.
- 4 Očistěte přístroj pomocí mírně vlhkého hadříku.
- 5 Neumývejte přístroj vodou teplejší než 50 °C.
- 6 Pokud používáte čistící prostředky, pak jediné ty, které jsou doporučené na mytí.

- 7 Opatrně opláchněte zařízení vodou a důkladně zkontrolujte, zda nikde nezůstaly stopy po čistícím prostředku.
- 8 Vlhký přístroj otřete suchou utěrkou a nechte důkladně oschnout ve větraném prostoru.
- 9 Jemným kartáčkem lehce promněte filtr na konci sacího potrubí.
- 10 Otřete vodu ručníkem a osušte.

### 7. VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

1 Kanyla je spotřební materiál. Kanyla musí být přibližně každých 6 měsíců z hygienických důvodů vyměněna, i když její tvar zůstane nezměněn.

### 8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název produktu	Hydrojet
Číslo produktu	LA140303
Rozměry	29,5 x 6,5 x 8 cm
Hmotnost	± 295 g
Specifikace baterie	1800 mAh
Doba nabíjení	± 2 – 4 hod
Spotřeba energie pokud se nenabíjí	Max. 5 W
Požadavek na nabíječku	5 V, 1 A
Pohotovostní odběr	Méně než 20 uA

### 9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Celý obal je složen z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím centru a použít je jako druhotné suroviny. Karton může být vyhozen do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii je třeba odvézt do místního třídícího a recyklačního centra.

Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte ekologicky a v souladu se zákonem.

Distributor pro ČR a SR:

**cm-trade**

CM Trade Via, s.r.o.  
Jundrovská 618/31  
62400 Brno

Tel: +420 549 274 164  
e-mail: [info@cm-trade.cz](mailto:info@cm-trade.cz)

Datum poslední verze: 20. 2. 2024

