



# LANAFORM

# Waist Warmer



<b>EN</b> ENGLISH	HEATING BELT	<b>PL</b> POLSKI	PAS ROZGRZEWAJĄCY
<b>FR</b> FRANÇAIS	CEINTURE CHAUFFANTE	<b>CS</b> ČEŠTINA	VYHŘÍVANÝ PÁS
<b>NL</b> NEDERLANDS	VERWARMENDE GORDEL	<b>SK</b> SLOVENČINA	OHREVNÝ PÁS
<b>DE</b> DEUTSCH	WÄRMEGÜRTEL	<b>SL</b> SLOVENŠČINA	GRELNI PASU
<b>ES</b> ESPAÑOL	CINTURÓN TÉRMICO	<b>HR</b> HRVATSKI	GRIJAČEG POJASA
<b>IT</b> ITALIANO	CINTURA TERMICA	<b>SV</b> SVENSKA	VÄRMEBÄLTE



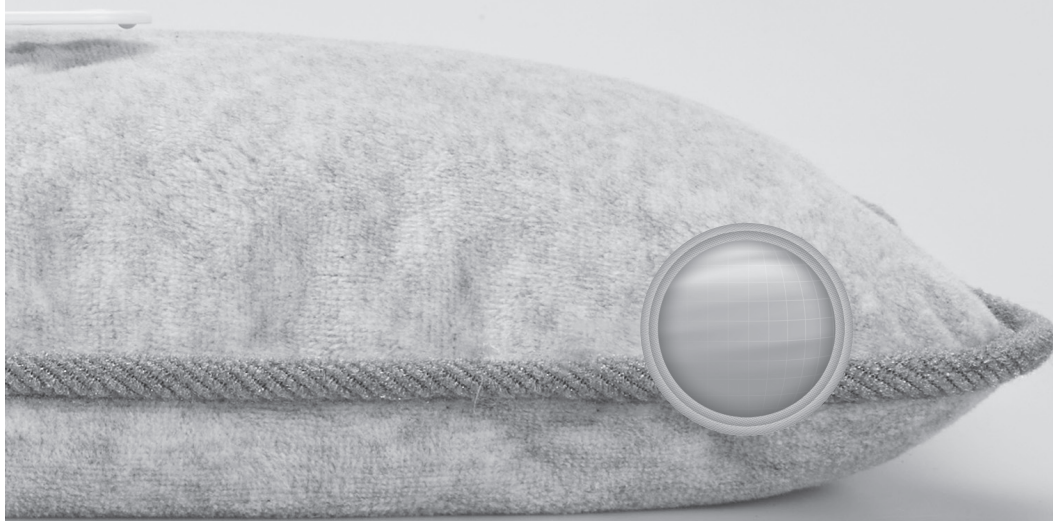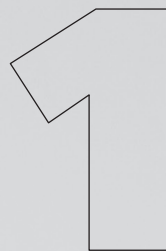

ENGLISH	EN	4	POLSKI	PL	35
FRANÇAIS	FR	9	ČEŠTINA	CS	40
NEDERLANDS	NL	14	SLOVENČINA	SK	45
DEUTSCH	DE	19	SLOVENŠČINA	SL	50
ESPAÑOL	ES	25	HRVATSKI	HR	55
ITALIANO	IT	30	SVENSKA	SV	59

## Bezpečnostní pokyny

**⚠ Než začnete elektrický ohřívací polštářek používat, přečtěte si všechny pokyny, zejména následující základní bezpečnostní upozornění.**

Používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem k použití popsáním v této příručce. **Ověřte**, zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům o napětí přístroje. **Tento spotřebič smějí používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícímu riziku.** Děti by si neměly se hrát se spotřebičem. **Čištění a údržba** by neměly provádět děti bez dozoru. **Nepoužívejte příslušenství, které společnost LANAFORM nedoporučila nebo které nebylo dodáno s výrobkem.** Elektrický ohříváč se musí používat s nabíječkou, která je součástí balení. **Nezapojujte ani**

**neodpojujte elektrickou zástrčku přístroje mokřými rukama.** V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej nahradit speciálním nebo obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku. **Elektrický ohříváč pravidelně kontrolujte.** Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte ho, i pokud nefunguje správně, spadl na zem či do vody, nebo je poškozen. **V** takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho servisním středisku. **Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a teprve poté jej vytáhněte.** Před každým použitím přezkontrolujte, zda elektrický ohříváč dobře těsní. Elektrický ohříváč nepoužívejte, pokud je zapojený do elektrické sítě. **Ohříváč se musí nabíjet na rovném povrchu, ne ve vertikální nebo nakloněné poloze.** Přístroj nepoužívejte pod pokryvkou či polštářem. **Přehřátí může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.** **Budte**

velmi opatrní, abyste si nezpůsobili popáleniny. **S** elektrickým ohřívačem manipulujte opatrně. Jeho vnitřní teplota totiž může po nabití dosáhnout až 75°C a na povrchu až 60°C. **V** případě potřeby můžete počkat, dokud teplota elektrického ohřívače neklesne, než jej začnete používat. **Pokud** elektrický ohřívač vydává nezvyklý zvuk nebo zápach, nebo z něj uniká voda, odpojte nabíječku a ohřívač nepoužívejte. **Pro** dobré rozložení teplota doporučujeme s elektrickým ohřívačem po 5–6 minutách nabíjení jemně zatřást. **Elektrický** přístroj nesmí zůstat zapojený bez dozoru. **Pokud** přístroj nepoužíváte, odpojte jej. **Napájecí** kabel chraňte před horkými povrchy. **Po** použití a před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě. **Do** elektrického nabíječe nevkládejte žádné předměty. **Mohlo** by to narušit jeho správné fungování. **Do** povrchu ohřívače nebouchejte ani neřežte. **Na** elektrický ohřívač při používání nevyvíjejte nadměrný tlak, mohlo by dojít k proražení nebo k poškození přístroje. **Elektrický** ohřívač odpojte, pokud nadměrně

hřeje. **Pokud** nabíjení automaticky po 15 minutách nevypne (světelná kontrolka stále svítí), odpojte nabíječku ze zásuvky. **Při** manipulaci neberte elektrický ohřívač za kabel nabíječky. **Před** uložením elektrického ohřívače zpět na místo se přesvědčte, že vychladl. **Po** uložení na místo na něj nepokládejte jiné předměty, které by na něj vyvíjely tlak. **Elektrický** ohřívač je určen výhradně pro domácí použití. **Nepoužívejte** ho v nemocnici nebo k jakémukoli lékařskému ošetření. **Elektrický** ohřívač nesmějí používat děti. **Nepoužívejte** ho pro nemocné osoby, kojence nebo osoby necitlivé na teplo. **Nepoužívejte** elektrický ohřívač pro zahřátí nohou. **Je** zakázáno na elektrický ohřívač šlapat, mačkat ho a nebo na něj vyvíjet tlak. **Elektrický** ohřívač nepoužívejte v mikrovlnné ani klasické troubě. **Nedoporučujeme** používat elektrický ohřívač přímo na pokožku. **Pokud** se vám při používání elektrického ohřívače objeví na pokožce známky zarudnutí, nepříjemné pocity nebo bolest, nejméně na jednu hodinu přerušete jeho používání.

8

41 · ČEŠTINA

Pokud tento problém přetrvává, ohřívač dále nepoužívejte a v případě potřeby se neprodleně obraťte na vašeho lékaře. **Přístroj nikdy nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje), ani v místnostech, do kterých je přiváděn kyslík.**

**Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.**

## Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili vyhřívaný pás se samostatným ohřívačem Waist Warmer. Praktický pás se snadno používá a udrží vás několik hodin v teple, k nabíjení stačí jen několik minut. Ohřívač je velmi přizpůsobivý a může být použit i jen pro ohřátí rukou a šije. Nebo může být použit s nastavitelným pásem pro cílené zaměření na břicho nebo záda. Navíc ho budete moci díky větší ochraně používat zcela bezpečně.

A konečně potah tohoto ohřívače z 45% tvoří tkanina, jejíž vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET materiálu z plastových lahví.

## Specifikace 1

Materiál, ze kterého ohřívač vyrobený, je měkký a velmi příjemný.

Jeho stěny tvoří 2 tepelně stlačené tenké vrstvy, zajišťující pevnost a bezpečnost.

Elektrický ohřívač nabízí díky své technologii rychlejší systém vyhřívání a dlouhodobější udržení tepla.

## Návod k použití

Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte, zda je neporušený a zda balení obsahuje všechny součásti. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce. Pokud přístroj vykazuje známky poškození, nepoužívejte ho a vraťte jej prodejci.

## Nabíjení elektrického ohřívače 1

Položte nabíječ na stůl.

Zapojte nabíječku do konektoru ohřívače, jak je vyznačeno na nákrese. Nabíječku zapojte do elektrické sítě. Rozsvítí se kontrolka a elektrický ohřívač se zahřívá.

Jakmile je elektrický ohřívač připraven, kontrolka zhasne a můžete nabíječku odpojit. Můžete ho pak použít samostatně nebo podle vaší potřeby zasunout do pásu.

**Pro dobré rozložení tepla doporučujeme s elektrickým ohřívačem po několika minutách nabíjení opatrně zatřást.**

Doba nabíjení je přibližně 10 minut (záleží na okolní teplotě), dokud elektrický ohřívač nedosáhne správné teploty.

## Údržba

### Údržba

- Aby ohřívač zůstal déle teplý, při nabíjení s ním zatřeste, aby se voda promíchala. Tato manipulace zajistí stejnoměrnou teploty vody v ohřívači a prodlouží dobu užití.
- Po několika použitích se může stát, že zjistíte, že došlo k nafouknutí ohřívače, které brání normálnímu nabití. Tento běžný fyzikální jev je zapříčiněn změnou teploty a tlaku uvnitř vodotěsné kapsy a dochází k nahromadění vzduchu.

To lze vyřešit vytlačení vzduchu z kapsy. K tomu nejdříve odstraňte kryt konektoru pomocí

křížového šroubováku, pak vytáhněte silikonový uzávěr, v případě potřeby za pomoci pinzety. Vytlačte co nejvíce vzduchu a pak nasadte zpět uzávěr a kryt konektoru.

## Skladování

Vložte pás a elektrický ohřívač do původního obalu nebo je uložte na suché místo.

Chraňte je před ostrými hranami a jinými ostrými předměty, které by mohly proříznout či propíchnout textilií.

Neomotávejte elektrický kabel, aby nedošlo k jeho poškození.

Před uložením zkontrolujte, zda je pás a ohřívač suchý.

## Čištění

Odpojte ohřívač od nabíječky a než jej začnete čistit, několik minut vyčkejte.

K čištění použijte měkkou, lehce navlhčenou houbičku.

Při čištění se ohřívač nesmí ponořit do tekutiny.

K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče nebo ředidla.

## Technické vlastnosti

- Napětí: 220-240V~
- Frekvence: 50/60Hz
- Příkon: 440W
- Složení vnější podšívky: 45% recyklovaný polyester, 55% bavlna
- Složení vnitřní podšívky: 100% polypropylen

## Problémy a jejich řešení

### Ohřívač se nafukuje a řádně nehřeje.

- Změny atmosférického tlaku mohou způsobit nahromadění vzduchu v ohřívači.

- Jemně vytlačte nadbytečný vzduch z ohřívače tak, že odstraníte kryt konektoru pomocí křížového šroubováku. Pak vytáhněte silikonový uzávěr, v případě potřeby za pomoci pinzety. Vytlačte co nejvíce vzduchu a pak nasadte zpět silikonový uzávěr a kryt konektoru.



## Rady z oblasti likvidace odpadů

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

## Omezená záruka

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplncích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od

prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.

CS



## Vyhlasenie o ochrane

**⚠ Skôr, ako začnete elektrickú ohrievaciu nádobu používať, prečítajte si všetky pokyny, pozornosť venujte najmä nasledujúcim základným bezpečnostným opatreniam.**

Toto zariadenie používajte výlučne v súlade s návodom na použitie, ktorý je tu uvedený. **Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu zariadenia. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporučila spoločnosť LANAFORM alebo ktoré sa nedodáva spoločne s týmto zariadením. Elektrická ohrievacia fľaša sa musí používať s nabíjačkou dodávanou v aktuálnom obale.**

Prístroj nepripájajte do elektrickej zástrčky ani ho z nej neodpájajte mokrými rukami. **V prípade poškodenia elektrického kábla je nutné nahradiť ho špeciálnym alebo podobným káblom, ktorý získate od dodávateľa alebo v jeho servisnom stredisku. Elektrickú ohrievaciu nádobu pravidelne kontrolujte. Zariadenie nezapájajte, ak sa poškodila elektrická zástrčka, a nepoužívajte ho ani v prípade, že nefunguje správne, spadlo na zem alebo do vody, prípadne je poškodené. V danom prípade nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo v jeho servisnom stredisku. Ak prístroj spadne do vody, skôr, ako ho vyberiete, odpojte ho okamžite od zdroja napájania elektrickej energie. Pred každým použitím elektrickej ohrievacej fľaše skontrolujte, či je dobre zapojená. Elektrickú ohrievaciu fľašu nepoužívajte, keď je zapojená do napájania. Elektrickú ohrievaciu nádobu je potrebné nabíjať na rovnom povrchu. Nesmie byť vo vertikálnej polohe ani naklonená.**

SK

45 · SLOVENČINA

**N**epoužívajte tento prístroj pod dekou ani pod vankúšom. **N**admerné teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia. **D**održiavajte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili popáleninám. **S** elektrickou ohrievacou nádobou zaobchádzajte opatrne. **J**ej vnútorná teplota po nabití môže dosiahnuť 75°C a teplota na povrchu 60°C. **V** prípade potreby môžete pred použitím elektrickej ohrievacej fľaše počkať, kým sa teplota zníži. **K**eď počujete alebo zaznamenáte abnormálny šum alebo zápach, ako aj únik z elektrickej ohrievacej fľaše, vyberte nabíjačku a elektrickú ohrievaciu fľašu nepoužívajte. **A**by ste zabezpečili dobré rozloženie tepla, odporúča sa mierne pretrepať elektrickú ohrievaciu fľašu po 5 - 6 minútach pri nabíjaní. **P**rístroj nesmie nikdy zostať bez dozoru, keď je zapojený do siete. **A**k sa nepoužíva, odpojte ho od zdroja napájania. **N**apájací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov. **P**o použití alebo pred čistením zariadenie vždy odpojte od elektrickej

siete. **D**o elektrickej ohrievacej nádoby nedávajte žiadne predmety. **M**ôžu ovplyvniť jej správne fungovanie. **N**erobte a nerozrezávajte povrch ohrievacej nádoby. **N**epoužívajte príliš veľký tlak na elektrickú ohrievaciu nádobu, keď ju používate, pretože môže dôjsť k úniku alebo poškodeniu jednotky. **E**lektrickú ohrievaciu fľašu odpojte, ak sa zahrieva abnormálne. **A**k sa nabíjanie elektrickej ohrievacej fľaše neskončí automaticky po 15 minútach (kontrolka zostane zapnutá), zástrčku odpojte od nabíjačky. **N**eposúvajte elektrickú ohrievaciu nádobu pomocou napájacieho kábla nabíjačky. **P**red uložením elektrickej ohrievacej nádoby sa uistite, že sa teplota elektrickej ohrievacej nádoby znížila. **K**eď elektrickú ohrievaciu nádobu odkladáte, neukladajte na ňu iné predmety. **E**lektrická ohrievacia nádoba je určená len na použitie v domácnosti. **N**epoužívajte v nemocničnom prostredí ani na akúkoľvek lekársku starostlivosť. **E**lektrická ohrievacia fľaša nie je určená pre deti. **N**epoužívajte elektrickú ohrievaciu nádobu pre chorých,

deti ani ľudí necitlivých na teplo. **Nepoužívajte elektrickú ohrievaciu nádobu na zahriatie nôh. Je zakázané stúpať na elektrickú ohrievaciu nádobu nohami, rozdrviť ju alebo ju stláčať. Nepoužívajte elektrickú ohrievaciu nádobu v mikrovlnnej rúre ani v tradičnej rúre. Odporúča sa nepoužívať elektrickú ohrievaciu nádobu v priamom kontakte s pokožkou. Ak pri používaní elektrickej fľaše s horúcou vodou spozorujete abnormálne začervenanie pokožky alebo dokonca pocit nepohodlia či bolesti, prestaňte ju používať aspoň na jednu hodinu. Ak tento jav pretrváva, odložte používanie fľaše s horúcou vodou a v prípade potreby sa rýchlo poraďte so svojím lekárom. Nikdy tento prístroj nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje), ani v miestnosti, do ktorej sa vpúšťa kyslík.**

**☒ Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.**

## Úvod

Ďakujeme vám za nákup ohrevného pásu s individuálnou ohrievacou fľašou Waist Warmer. Je praktická a jednoducho sa používa, vďaka

čomu vám poskytuje teplo niekoľko hodín, pričom sa nabíja len pár minút. Mimoriadne univerzálna ohrievacia fľaša sa môže používať samostatne na ohrievanie rúk, zátylku. Alebo spolu s nastaviteľným pásom na cielený ohrev v mieste brucha alebo chrbta. Okrem toho ju môžete používať bezpečne vďaka zvýšenej ochrane.

Napokon tento kryt ohrievacej fľaše je vyrobený zo 45% tkaniny, ktorej vlákna sú získané z recyklovaného PET materiálu, z plastových fliaš.

## Vlastnosti ☒ 1

Telo ohrievacej fľaše je mäkké a veľmi pohodlné.

Steny pozostávajú z 2 tenkých stlačených termovrstiev, ktoré zvyšujú jej pevnosť a bezpečnosť.

Vďaka svojej technológii má elektrická ohrievacia fľaša najrýchlejší systém ohrievania a udržiavania teploty po dlhší čas.

## Návod na použitie

Po vybratí výrobku z obalu skontrolujte, či je neporušený, rovnako ako komponenty dodávané so spotrebičom. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte a obráťte sa na dodávateľa. Výrobok nepoužívajte v prípade chyby a vráťte ho predajcovi.

## Nabíjanie elektrickej ohrievacej fľaše ☒ 1

Ohrievaciu fľašu položte vodorovne na stôl.

Nabíjačku zasunúť do konektora ohrievacej fľaše, ako je znázornené na obrázku. Zapojte napájací kábel do zástrčky. Rozsvieti sa kontrolka a elektrická ohrievacia fľaša sa začne zohrievať.

Keď je elektrická ohrievacia fľaša pripravená, kontrolka zhasne a môžete odpojiť nabíjačku. Následne ju môžete používať samostatne alebo zasunúť do pásu v závislosti od požadovaného používania.

- ☉ **Aby ste zabezpečili dobré rozloženie tepla, odporúča sa mierne pretrepať elektrickú**

☒

47 - SLOVENČINA

ohrievaciu fľašu po niekoľkých minútach pri nabíjaní.

Čas nabíjania elektrickej ohrievacej nádoby je približne 10 minút (v závislosti od teploty okolitého prostredia), aby mal elektrický výhrevný vankúš správnu teplotu.

## Údržba

### Údržba

- Ak chcete, aby bol elektrický výhrevný vankúš dlhšie horúci, pri plnení ho prehýbajte, aby sa voda premiešala. Tým sa zabezpečí, že voda v elektrickom výhrevnom vankúši bude mať rovnomernú teplotu a predĺži sa čas používania.
- Po určitom počte použití môžete zaznamenať opuch, ktorý bráni normálnejmu zaťaženiu termoformu. Tento normálny fyzikálny jav je spôsobený zmenami teploty a tlaku vo vzduchotesnom vrecku a vytvára akumuláciu vzduchu.

Ak to chcete napraviť, jednoducho vypustíte vzduch z vrečka. Na tento účel najprv odstráňte kryt konektora pomocou križového skrutkovača a potom v prípade potreby pomocou klieští odstráňte silikónovú zástrčku. Odstráňte čo najviac vzduchu a potom nasadte zástrčku a kryt konektora.

### Skladovanie

Elektrickú ohrievaciu fľašu vložte do pôvodného balenia a uložte ju na suché miesto.

Výrobok chráňte pred ostrými hranami a inými ostrými predmetmi, ktoré by mohli tkaninu prepichnúť alebo inak poškodiť.

Elektrický kábel nabíjačky neomotávajte okolo fľaše, aby sa predišlo akémukoľvek zalomeniu.

Dbajte na to, aby bol pás a ohrievacia fľaša pred uskladnením suché.

## Čistenie

Ohrievaciu fľašu odpojte z elektrickej siete a pred čistením počkajte niekoľko minút.

Vyčistite ju mäkkou vlhkou špongiou.

Neponárajte do kvapaliny na čistenie.

Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy ani riedidlá.

## Technické vlastnosti

- Napätie: 220-240V~
- Frekvencia: 50/60Hz
- Príkon: 440W
- Zloženie vonkajšej vrstvy: 45% recyklovaný polyester, 55% bavlna
- Zloženie vnútornej vrstvy: 100% recyklovaný polypropylén

## Poruchy a ich riešenie

### Fľaša na horúcu vodu sa nenapúšťa a nezohrieva správne.

- Zmeny atmosferického tlaku môžu vytvárať vo fľaši na horúcu vodu vzduch.
- Opatrne odstráňte prebytočný vzduch z termoformu tak, že najprv pomocou križového skrutkovača odstránite kryt konektora. Potom v prípade potreby odstráňte silikónový uzáver pomocou klieští. Odstráňte čo najviac vzduchu a potom nasadte silikónovú zátku a kryt konektora.



### Rady z oblasti likvidácie odpadu

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera.

Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

## Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov,

zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM vplyv.

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záruka stráca platnosť.



## LANAFORM

Waist Warmer Go  
LA180207 / LOT 001

### **Manufacturer & Importer**

Lanaform SA

### **Postal Address**

Rue de la Légende, 55  
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91  
info@lanaform.com  
www.lanaform.com