

LANAFORM


Masážní podložka Bodyscan




CZ ČEŠTINA

Masážní podložka

1

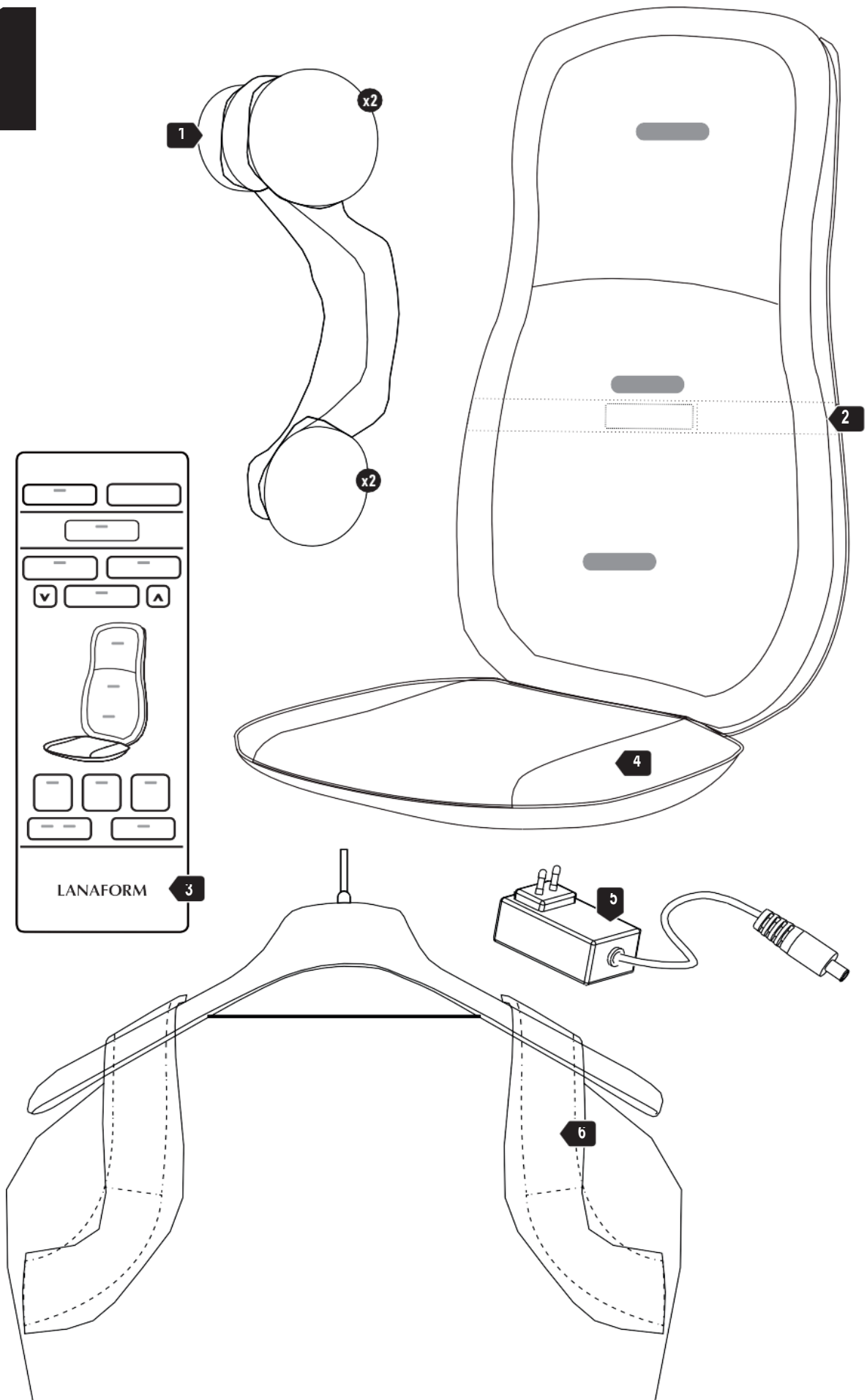

2

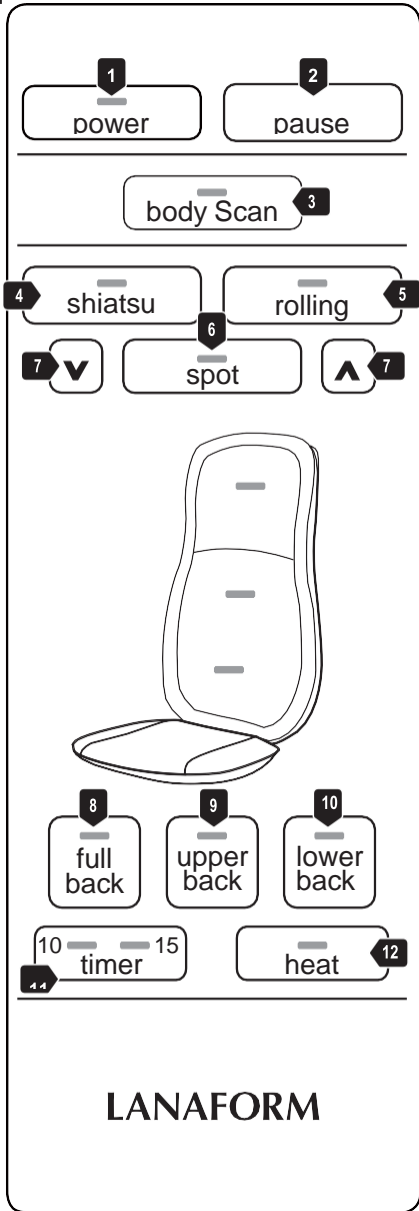

Obsah balení

- 1 podložka Bodyscan Massager
- 1 dálkové ovládání
- 1 napájecí kabel
- 1 návod k použití

Opatření pro použitím

⚠ Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny, zejména tyto základní bezpečnostní pokyny.

☒ Fotografie a další zobrazení produktu v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale nemusí poskytovat dokonalou reprodukci produktu.

⚠ Varování

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopili související rizika. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Povrch přístroje je horký. Lidé, kteří jsou citliví na teplo, by měli být při používání tohoto zařízení opatrní. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností Lanaform, nebo které není dodáno s tímto zařízením. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za podobný, který je k dispozici u dodavatele nebo v jeho poprodejním oddělení. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozená zástrčka, pokud zařízení nepracuje správně, upadlo na podlahu, pokud je poškozeno nebo spadlo do vody. Nechte zařízení zkontrolovat a opravit u dodavatele nebo jeho poprodejním oddělení. Nenoste toto zařízení za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. S tímto zařízením nikdy nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové úchyty. Po použití nebo před čištěním zařízení vždy odpojte. Pokud zařízení spadne do vody, ihned jej odpojte, než jej vyndáte. Toto elektrické zařízení nesmí být nikdy ponecháno zapnuté bez dozoru. Odpojte jej vždy, když jej nepoužíváte. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy. Nepoužívejte tento výrobek před spaním. Masáž působí jako stimulant, který může oddálit nástup spánku. Nikdy nedovolte, aby vám zařízení spadlo a nikdy nevkládejte předměty do žádného z otvorů. Nikdy nepoužívejte toto zařízení v místnosti, kde se používají aerosoly (spreje), nebo v místnosti, kde se podává kyslík. Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osoby. Chcete-li zařízení odpojit, ujistěte se, že je tlačítko „POWER“ vypnuté, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Pokud máte obavy o své zdraví, před použitím tohoto zařízení se poraďte s lékařem. Nepoužívejte zařízení:

- V případě patologických změn nebo lézí na zádech (např. vyklouznutí ploténky, otevřená rána)
- Během těhotenství
- Během spánku
- Ve vozidle
- Pro zvířata
- Při provádění činností, během nichž by neočekávaná reakce mohla být nebezpečná
- Po vstřebání látek, které omezují smyslové vnímání (např. léky s analgetickým účinkem, alkohol)

Pokud při používání tohoto zařízení pocítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem. Nepoužívejte toto zařízení déle než 15 minut v kuse (nebezpečí přehřátí). Před opětovným použitím jej nechte alespoň 15 minut vychladnout. Nikdy nepoužívejte toto zařízení na žádnou část těla, která je oteklá nebo zanícená nebo pokud máte vyrážku. Vyžádejte si lékařskou radu před použitím přístroje, pokud:

- Trpíte závažným onemocněním nebo jste podstoupili operaci horní části těla

- Máte kardiostimulátor, implantát(y), nebo jakýkoli jiný zdravotnický prostředek, trombózu, cukrovku
- Jestliže cítíte jakoukoli bolest s nejasnými příčinami.

Tento produkt je neprofesionální masážní přístroj určený k uvolnění unavených svalů. **Nepoužívejte** toto zařízení jako náhradu lékařského ošetření. Je určen pouze pro domácí a neprofesionální použití. **Nikdy nepoužívejte pod přikrývkou / prostěradlem**, mohlo by dojít k ucpání vzduchových otvorů. Zařízení by se nadměrně zahřálo, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

⚠Varování

Představení

Děkujeme, že jste si vybrali Lanaform Bodyscan Massager. Bodyscan Massager je masážní potah sedadla se 4 masážními hlavicemi, které dokonale napodobují masáž shiatsu a rolovací masáž. S funkcí skenování můžete využít jedinečnou masáž přizpůsobenou vašemu tělu! Ať už se používá na celá záda a krk nebo jen na konkrétní bod, masážní efekt je zvláště účinný pro uvolnění stažených svalů a tonizaci unavených tkání. Přístroj vám přináší blahodárnou relaxaci, díky které zapomenete na každodenní stres.

Popis zařízení, obr. 1

- 1 Čtyři masážní hlavice
- 2 Upevňovací popruhy
- 3 Dálkové ovládání
- 4 Sedák
- 5 Napájecí kabel
- 6 Popruh na zavěšení

Popis dálkového ovládání, obr. 2

- 1 POWER: tlačítko zapnutí/vypnutí a počáteční reset masážního mechanismu
- 2 PAUSE: okamžitě zastaví zařízení
- 3 BODY SCAN: tlačítko pro aktivaci skenování těla
- 4 SHIATSU: tlačítko pro výběr režimu masáže shiatsu
- 5 ROLLING: tlačítko pro výběr režimu rolovací masáže
- 6 SPOT: tlačítko pro výběr masážní oblasti (bodová masáž)
- 7 ŠIPKY NAHORU a DOLŮ: tlačítka pro nastavení výšky (bodová masáž)
- 8 FULL BACK: masáž celých zad a šíje
- 9 UPPER BACK: masáž horní části zad
- 10 LOWER BACK: masáž dolní části zad
- 11 TIMER: tlačítko pro výběr 10 nebo 15 minut
- 12 HEATÍ: tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce ohřevu

Příprava před použitím

01 Položte Bodyscan Massager svisle na vhodnou židli se sedákem a opěradlem. Ujistěte se, že je sedací část umístěna tak, aby byla v plném kontaktu se sedákem židle a v adekvátní výšce vašich zad.

02 Přístroj Bodyscan zajistěte pomocí popruhů.

03 Zapojte zařízení do elektrické sítě.

Instrukce

01 Přitiskněte záda svisle na masážní přístroj. Budete muset sedět rovně, abyste zajistili přesnou palpaci zad. Umožníte tím aktivaci funkce skenování těla, která měří velikost uživatele. Na začátku opatrně přitlačte záda k masážní podložce. Ujistěte se, že sedíte na sedadle pohodlně a s rovnými zády. Sedíte uprostřed tak, aby se masážní hlavice pohybovaly správně vlevo a vpravo od vaší páteře.

Pečlivě zkontrolujte, zda je pro vás masážní poloha příjemná, a poté postupně přesuňte váhu směrem k masážnímu zařízení. Masáž by měla být vždy příjemná a uvolňující. Pokud je masáž bolestivá nebo nepříjemná, přerušete ji nebo změňte polohu přístroje.

02 Zapněte masážní zařízení stisknutím tlačítka POWER. Po celou dobu palpce zad bliká na dálkovém zařízení tlačítko BODYSCAN. Po ukončení palpce se aktivuje masážní program „Shiatsu“. LED diody indikují právě používanou masážní funkci.

03 Vyberte si svůj masážní režim:

- SHIATSU: Kombinace shiatsu a rolovací masáže aplikované na záda a šíji
- ROLLING: Rolovací masáž aplikovaná na záda a šíji.

04 Vyberte si oblast masáže:

- CELÁ ZADA: celá záda a krk
- HORNÍ ZÁDA: horní část zad
- DOLNÍ ZÁDA: spodní část zad
- SPOT: pomocí šipek „nahoru“ a „dolů“ vyberte konkrétní místo masáže zad.

05 Funkci ohřevu zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka HEAT.

06 Vyberte dobu (10 nebo 15 minut). Při výběru masážní oblasti se aktivuje automatické vypnutí, které se nastaví na 15 minut. Stisknutím tlačítka časovače lze automatické vypnutí nastavit na 10 nebo 15 minut.

Upozornění: Pokud změňte čas na časovači, začne odpočítávat znovu od nuly. Abyste zabránili přehřátí přístroje, zvolte maximální dobu masáže na začátku a během masáže ji neměňte.

07 Pokud chcete masáž ukončit před koncem zvolené doby, stiskněte tlačítko POWER. Masážní hlavice se vrátí do výchozí polohy. Neodpojujte zařízení od sítě během provozu. Po vypnutí zařízení vždy vyčkejte několik okamžiků, než se hlavice vrátí do své výchozí polohy.

Čištění a údržba

01 Odpojte sedák od zdroje napájení a počkejte několik minut, než jej začnete čistit.

02 Vyčistěte jej měkkou, mírně navlhčenou houbou.

03 Nikdy nedovolte, aby voda nebo jiná tekutina přišla do kontaktu s podložkou.

04 Při čištění jej neponořujte do kapaliny.

05 K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče nebo ředidla.

06 Před opětovným použitím počkejte, až bude zařízení zcela suché.

Skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej uchovávat v původním obalu na suchém místě a nepokládat na něj žádné předměty. Zařízení můžete také zavěsit do šatní skříně pomocí věšáku. K tomu je třeba zasunout věšák do závěsného popruhu umístěném na boku zařízení. Ujistěte se, že používáte stabilní dřevěný věšák, který unese váhu zařízení. Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami a jinými špičatými předměty, které by mohly pořezat nebo propíchnout povrch látky. Nezavěšujte polštář za kabel ručního ovládání nebo napájecího kabelu.

Odstraňování problémů

☹ Problém	? Příčina	☺ Řešení
Masážní hlavice se pohybují příliš pomalu.	Masážní hlavice jsou vystaveny nadměrnému namáhání.	Snižte tlak při masáži.
Masážní hlavice se pohybují pouze v horní nebo dolní oblasti.	Masáž byla aktivována pouze pro určitou oblast.	Stisknutím tlačítka celá, horní část zad nebo dolní část zad změňte/rozšíříte masážní oblast.
Masážní hlavice se nepohybují.	Zařízení není zapojeno.	Připojte zařízení a zapněte jej.
	Zařízení není zapnuté	Zapněte masážní přístroj pomocí tlačítka POWER. Vyberte oblast, kterou chcete masírovat.
	Spustil se systém ochrany proti přehřátí, zařízení je poškozené.	Kontaktujte prodejce nebo poprodejní oddělení.

Technické údaje

- Označení produktu: LA110318
- Napájení: 12VDC, 2,5A
- Rozměry: 108 x 40 x 10,9cm
- Hmotnost: cca. 9,0 kg

Poradenství při likvidaci odpadu

Celý obal je vyroben z ekologicky bezpečných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít je jako druhotné suroviny. Karton lze umístit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii odnesete do místního třídícího a recyklačního střediska.

Jakmile přístroj přestanete používat, zlikvidujte jej ekologicky a v souladu s právními předpisy.

Omezená záruka

Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou případů popsanych níže.

Záruka Lanaform se nevztahuje na způsobené škody v důsledku běžného opotřebení. Zároveň záruka nepokryje poškození způsobené hrubým, nevhodným nebo nesprávným použitím, nehody, použití neschváleného příslušenství, změny provedené na produktu nebo jiné okolnosti jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu Lanaform. Společnost Lanaform nemůže nést odpovědnost za žádný typ značné, nepřímé nebo specifické škody.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vašeho zařízení Lanaform opraví nebo vymění váš spotřebič podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra Lanaform. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem společnosti Lanaform způsobí neplatnost této záruky.

Výrobce & Dovozce

Lanaform SA

Rue de la Légende, 55 4141 Louveigné, Belgie

www.lanaform.com

Distributor v ČR:

CM Trade Via, s.r.o.

Olomoucká 3419/7

618 00 Brno Židenice

www.cm-trade.cz